


CoaguChek[®] XS System

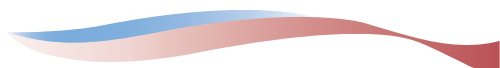

*Immediate PT/INR results.
Immediate therapy adjustments.*

The New CoaguChek XS System¹

The CoaguChek XS System is the latest in point-of-care anticoagulation testing and is intended for professional use. This third generation of CoaguChek PT/INR monitors has been designed to offer the following:


- Small, hand-held meter
- Sample, application outside of meter
- Approximately 60 second test time
- Auto power on through strip insertion
- Code chip programming
- IR Data transfer capability
- 100 value memory with time and date



CoaguChek XS PT test strip technology

The CoaguChek XS PT test strip technology may change the way you look at a point-of-care PT/INR system with the following strip features:

- 10 µL sample size
- 1.0 low ISI reagent
- Wide hematocrit range 25–55%
- Insensitive to therapeutic levels of heparin and LMWH
- Reagent chamber on-board controls
- Vial packaging with 18 month room temperature storage

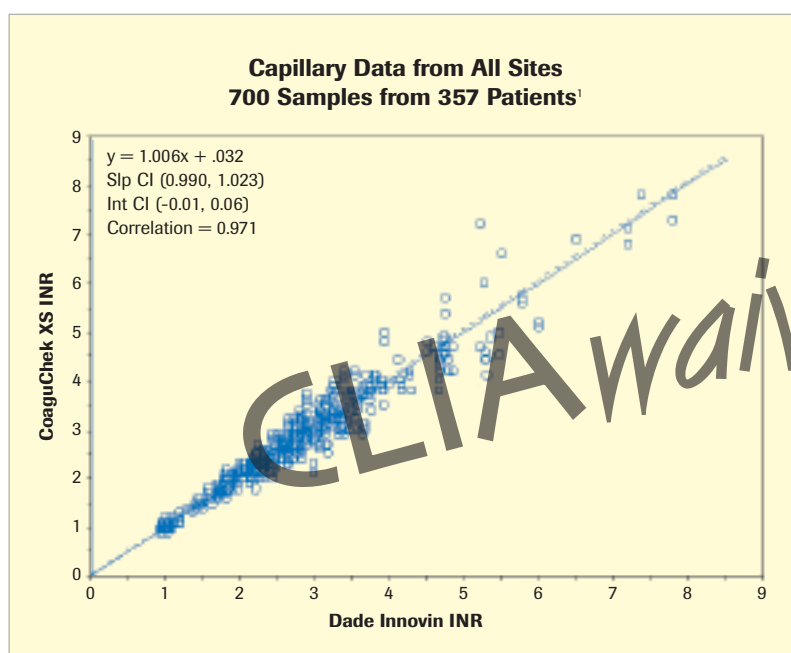

Support when you need it.

- 24 hour tech service support:
1-800-428-4674
- Reimbursement hotline:
1-800-428-5074 ext. 13967

**For more information, contact your Roche Diagnostics
Account Manager/Sales Specialist: 1-800-852-8766.**

¹. Package insert for the CoaguChek XS System.

CLIAwaived.comTM

For more information please contact CLIAwaived Inc. at
4332 Corte de la Fonda ■ San Diego, CA 92130
Tel: (858) 481-5031 ■ Toll Free: (888) 882-7739

E-mail: info@cliawaived.com

Visit us on the web at: www.cliawaived.com

Distributed by: CLIAwaived, Inc.

CLIAwaived.comTM

CLIAwaived.com - 4332 Corte de la Fonda - San Diego, CA 92130

Toll Free : (888) 882-7739 - Phone (858) 481-5031

FAX: (801) 720-7568 - www.cliawaived.com

Roche

Diagnostics

Coaguchek[®] XS

El coagulómetro portátil
de nueva generación
para el autocontrol de INR



CoaguChek® XS

Descubrimos la **simplicidad de uso.**

- ▶ **Máxima fiabilidad**
- ▶ **Tamaño compacto**
- ▶ **Cantidad mínima de sangre**
- ▶ **Resultados de INR en sólo 1 minuto**

CoaguChek® XS es, sin duda alguna, el coagulómetro portátil más pequeño y también el más ligero. Las nuevas tiras pueden conservarse a temperatura ambiente (ya no es necesario conservarlas en la nevera) y permiten una aplicación más simple de la muestra (por fuera del instrumento, por capilaridad, desde arriba o lateralmente, por la derecha o por la izquierda).

CoaguChek® XS reúne las mejores cualidades que un coagulómetro portátil puede ofrecer: la calibración automática, la utilización de un volumen mínimo de sangre capilar (o también venosa) y pocos y sencillos pasos analíticos.



1

CoaguChek® XS se enciende automáticamente al introducir la tira.



2

CoaguChek® Softclix y sus lancetas hacen que las extracciones de 10 µl. de sangre resulten prácticamente indoloras.

El control de calidad integrado del sistema (OBIS) hace que no sea necesario utilizar soluciones de control.

- 1) inserción de la tira
- 2) punción en el dedo
- 3) aplicación de la muestra
- 4) lectura del resultado



3

La aplicación de la muestra en la tira reactiva se realiza fuera del instrumento, por capilaridad, desde arriba o lateralmente.



4

La amplia pantalla con iconos facilita la lectura

El sistema CoaguChek® XS puede ser adquirido **sólo** a través de la farmacia.
Le detallamos la información que puede serle de utilidad en el caso de confiar en nuestro sistema CoaguChek® XS

Kit CoaguChek XS	C.N. 202538.7	PVP rec. 730 € (IVA incl.)
CoaguChek XS PT 24 tiras	C.N. 202539.4	PVP rec. 100 € (IVA incl.)
CoaguChek XS PT 48 tiras (2 x 24)	C.N. 202540.0	PVP rec. 178 € (IVA incl.)



Un soporte importante para la máxima eficacia del **tratamiento anticoagulante oral**




Cientos de estudios clínicos han demostrado que CoaguChek® es el sistema ideal para garantizar una mayor implicación del paciente en la gestión de su propio tratamiento.

El autocontrol de INR permite que las mediciones del tiempo de protrombina se realicen con una frecuencia ideal, que los valores se mantengan más tiempo dentro del margen terapéutico y que disminuyan las complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas.



- **Implicación del paciente**
- **Autocontrol más frecuente**
- **Mejor control del tratamiento**
- **Reducción de las complicaciones**

Estabilidad aparente de los valores de INR (período de 4 semanas)

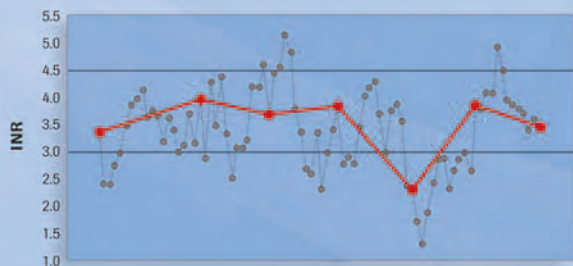

La estabilidad aparente: una cuestión para pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante oral.

La mayor frecuencia en la medición de los valores evidencia una estabilidad aparente, con niveles de INR que no se mantienen dentro del margen terapéutico.

- Menor frecuencia de las mediciones
- Mayor frecuencia de las mediciones (realizadas cada 2 días)

Familia Coaguchek® XS

Una plataforma **inspirada en sus necesidades**

Coaguchek® XS

La solución segura y eficaz para el autocontrol del paciente. Su uso, siempre bajo supervisión del profesional médico y con una adecuada formación del paciente, sólo tiene ventajas.



Coaguchek® XS Plus

El nuevo coagulómetro diseñado específicamente para profesionales con capacidad de gestión de datos en el propio medidor.

El sistema **CoaguChek XS** y el sistema **CoaguChek XS Plus** utilizan el mismo principio de detección y la misma tira reactiva. Ambos sistemas proporcionan resultados comparables al laboratorio¹.

Especificaciones técnicas

Coagulómetro CoaguChek® XS o XS Plus

- Principio de funcionamiento Determinación electroquímica del tiempo de protrombina (PT) tras la activación de la coagulación por medio de tromboplastina recombinante humana
- Tiempo de medición Aprox. 1 minuto

Coaguchek® XS PT Test

- Volumen de muestra 10 µl
- Tipo de muestra Sangre completa capilar fresca o sangre completa venosa no anticoagulada
- Aplicación de la muestra Por capilaridad sobre la tira reactiva o en uno de ambos lados
- ISI 1,0 (tromboplastina hRTF)

COAGUCHEK, SOFTCLIX and
BECAUSE IT'S MY LIFE are trademarks of Roche

CLIAwaived.com™

CLIAwaived.com - 4332 Corte de la Fonda - San Diego, CA 92130

Toll Free : (888) 882-7739 - Phone (858) 481-5031

FAX: (801) 720-7568 - www.cliawaived.com



Diagnostics